

DOCTORAIR 客服諮詢窗口

0800-255-123 #16658

週一至週五 (例假日除外) 9:00-12:00 / 13:00-18:30

FB 臉書粉絲團及經銷店鋪等資訊

DOCTORAIR

搜尋



詳細產品資料及優惠活動請上官網及臉書粉絲專頁查詢

銷售經銷商



▲ 使用注意事項

使用產品前請務必詳讀產品附的使用說明書。本產品為家庭用電氣按摩器，請勿將本產品用於商用等其他目的及其他治療機器同時使用。附屬的 AC 變電器為本產品專用，請勿將本 AC 變電器使用於其他機器，或是將非專用的 AC 變電器使用在本產品上。若您感受到身體異常或是發現產品故障時，請立刻停止使用本產品。

◎ 符合下列情況者，切勿使用本產品

嬰幼兒及小朋友、有心臟病的人、有急性症狀的人、有發燒性症狀的人、血壓異常的人、有血栓症的人、有重度靜脈瘤的人、有急性靜脈瘤的人、飲酒中的人、服用藥物中的人、曾因為化學纖維引發接觸性皮炎的人、身體不太好的人、非常疲倦的人、受到醫生禁止按摩的人、無法自己表達意願的人等。

◎ 符合下列情況者，請諮詢醫生再使用本產品

使用心律調整器等容易受到電磁波干擾及埋入體內型醫療用電氣機器的人、有惡性腫瘤的人、有心臟疾病的人、腿部有嚴重血液循環障害的人、喪失溫度感覺的人、懷孕中及剛生產完的女性、因糖尿病等導致的高度未梢神經障礙所造成的知覺障礙、在使用產品的部位有創傷的人、需要安靜或體力衰退的人、體溫 38°C 以上 (發燒期) 的人 / 例如：急性發炎症狀 (倦怠感、惡寒、血壓變化等) 強烈的時期及身體衰弱的時候、出現骨質疏鬆症、脊椎骨折、扭傷、肌肉勞損等急性 (疼痛性) 症狀的人、將產品用在過去曾經接受治療的部位，或是用在受傷部位的人、有肌腱炎、身體受到衝撞、頸椎受傷、脊柱狹窄症、椎間盤凸出的人、脊椎異常的人，或是脊椎左右彎曲的人、正在接受醫生治療的人，以及身體感受到上述以外異常的人。

■ 照片及插畫皆為示意圖。 ■ 產品規格及設計可能會因性能、機能的提升而變更，將不再另行通知。

製造商：DREAM FACTORY 〒556-0005 大阪市浪速區日本橋 5-13-3 川北大樓 2F

代理商：群光電子股份有限公司 新北市三重區光復路二段 69 號

MRO01-171107

DOCTORAIR 3D MASSAGE ROLL | 3D 按摩滾筒 |

※ 強力振動 ※



• HOW TO MASSAGE ROLL
如何使用按摩滾筒

全身“強力”按摩

輕盈的**充電式無線按摩器**，隨時隨地都能輕鬆享受按摩。輕巧卻有力。在3分鐘內最多可振動**10,000**次，強力地按摩全身。



搭載
大容量電池
最久可使用
180分鐘！



大腿、臀部按摩



腰部、背部、肩胛骨按摩




腰部、臀部按摩

• ASSIST COVER
專用布套

利用 專用布套 增添使用的方式



按摩您喜歡的部位

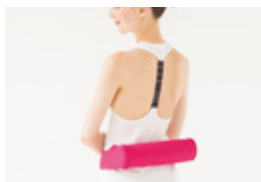

腰部、臀部按摩

只要運用隨附的專用布套，就連**手無法接觸到的部位**都可以使用本產品。同時利用強力的震動按摩放鬆全身的僵硬。



• COLOR VARIATION
多變的色彩選擇



黑色 / MR-001BK
JAN : 4580235554883



附專用布套



粉紅色 / MR-001PK JAN : 4580235554920



綠色 / MR-001GN JAN : 4580235554890



橘色 / MR-001OR JAN : 4580235554913



灰色 / MR-001GR JAN : 4580235554906



通過日本醫療器材認證

<功能、效果>
替代按摩和指壓、幫助恢復疲勞、促進血液循環、減緩肌肉疲勞、放鬆肌肉僵硬、減緩神經痛和肌肉痛。

一般名稱：家庭用電氣按摩器
日本醫療認證號碼：228AHBZX00025000



4 種振動模式供您選擇



2,300 次/分鐘
模式1
(電源ON)

2,700 次/分鐘
模式2

2,300~
3,700 次/分鐘
模式3
變動回轉速

3,700 次/分鐘
模式4

電源OFF
(長按功能按鈕也能夠關閉電源)

3D MASSAGE ROLL | 3D按摩滾筒 |

【本體】

商品名稱 3D按摩滾筒
建議售價 NTS\$3,990
電源 充電式(內建充電鋰電池DC7.4V 2200m/Ah)
額定輸入 DC9.0V 1A
額定電力消耗 9W
充電時間※ 約3小時(電力充滿)
電池持續時間※ 最長：約180分鐘(振動設定在弱使用時)
最長：約90分鐘(振動設定在強使用時)
充電次數※ 約450次
振動次數 弱：2300次/分(±300次)
中：2700次/分(±300次)
強：3700次/分(±300次)
模式：最大平均3100次/分(±300次)
計時器 15分鐘 (±10%)

使用環境溫度 +10~+40度 30~85%RH
保管環境溫度 0~+40度 10~85%RH
尺寸 ∅85 X H310mm
重量 675g
附贈配件 AC變壓器、輔助布套、使用說明書(保固書)
材質 EVA、ABS、聚脂纖維
生產國 中國
※實際的續航時間及充電次數，會根據使用狀況、使用環境的不同而有所差異。

【AC變壓器】

型號名稱 GME12A-090100FWR
額定輸入 AC100-240V~50-60Hz 0.4A
額定輸出 DC9.0V 1A