

目次

前言	安全注意事項.....3
	各部位名稱及配件.....9
	關於遙控器.....11
使用方法	使用3D全方位紓壓按摩墊.....14
	開始按摩.....16
其他	保養及保存方法.....20
	故障排除.....21
	基本規格.....23
	保固及售後服務.....25



前言



安全注意事項

安全注意事項

為了防止使用者以及他人的人身安全與財產受到損害，請務必遵守以下所示之注意事項。

請務必充分理解以下內容（標示・記號圖示），再閱讀並遵守記載的注意事項。

關於警告・注意 區分並說明錯誤的使用方法 將導致的危險與損害程度。	
 警告	錯誤的使用方法將可能導致死亡或重傷。
 注意	錯誤的使用方法將可能導致受傷或房屋、財產的損壞。

記號圖示范例 以下記號圖示代表必須遵守的事項。	
 禁止	不得進行。
 必須遵守	必須進行。

警告

- 經醫師禁止接受按摩者請勿使用。(否則可能導致症狀惡化)
例：心臟疾患・急性疾病・發燒・血壓異常・血栓・重度動脈瘤
・急性靜脈瘤・各種皮膚炎或皮膚感染(包含皮下組織發炎)
・頸椎退化・飲酒或服藥中・曾對化學纖維出現過敏出疹反應者
・健康狀態不佳者・極度疲勞者等等
- 請勿供無法表達本身意見或無法自行操作者使用。(否則可能導致意外事故受傷)
- 使用時請勿進行其他作業。(否則可能導致意外事故・受傷)
- 使用時請勿配戴飾品等硬物、皮帶、圍巾，並請勿穿著領口有裝飾的服裝。
(否則可能導致意外事故・受傷)
- 請依照插座與配線器材的規格使用，並請勿使用100V交流電以外的電源。(否則可能導致火災)
- 請勿供嬰幼兒或年齡幼小的兒童使用本產品或當作玩具。(否則可能導致意外事故・受傷)
- 本產品最大負荷體重為100kg，請勿超過此承重上限。(否則可能導致故障)
- 請勿在暖桌中、暖氣附近、火爐等火源旁、電熱毯上使用。(否則可能導致火災・觸電・意外事故)
- 請勿一邊抽煙一邊使用。(否則可能導致火災・意外事故)
- 請勿刻意取下、毀損、切割主機的布套。(否則可能導致意外事故・受傷)
- 請勿將髮夾等尖銳物品或異物插入主機或轉接插頭中。(否則可能導致火災・觸電・意外事故)
- 請勿將AC轉接頭的連接線纏繞在主機或AC轉接頭機身上。(否則可能因連接線斷裂而導致火災・觸電)
- 請勿使AC轉接頭破損。(否則可能導致火災・觸電)
・損壞、改造、拉扯、過度彎曲、扭轉、捆成一束使用、將重物壓在其上、捻夾
- 將AC轉接頭自插座上拔除時，請勿拉扯AC轉接頭的連接線。(否則可能造成接觸不良而導致火災・觸電・短路起火)
- 請勿使用隨附AC轉接頭以外之產品。另，隨附AC轉接頭為本產品的專用配件，請勿用於其他機器。(否則可能導致火災・觸電・意外事故)
- 當按摩頸部周遭時請特別注意，請勿使用於頸部正面。(否則可能導致意外事故・受傷)
- 使用時請勿覆蓋棉被或毛毯。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。



禁止





警告

- 請勿用於以下部位。
・曾接受整形手術的部位・皮膚下埋有金屬、塑膠、矽膠等的部位、皮膚狀況異常的部位。例：異位性皮膚炎、臉部黑斑、皮膚發炎、發癢、發熱的部位、因物理性刺激而產生的黑斑或痣、敏感肌、蟹足腫體質等
・出現痛覺或知覺障礙的部位・胸部・陰部・頭部・骨折部位・關節部位
- 以下人士在使用前請務必先諮詢醫師。
・正在使用心律調節器等、容易受到電磁波影響的體內植入型電子儀器者
・患有惡性腫瘤者
・患有心臟疾病者
・患有嚴重腳部血液循環障礙者
・經判喪失溫度感知能力者
・懷孕或有懷孕可能者、剛生產完的產婦
・因糖尿病等嚴重末梢循環功能障礙而患有知覺障礙者
・按摩部位有傷口者
・需要靜養或體力衰退者
・體溫超過38°C以上(發燒)者
例：急性發炎症狀(疲倦、發冷、血壓出現變化等)嚴重或體力衰弱時
・患有骨質疏鬆症、脊椎骨折、扭傷、肌肉拉傷等急性(疼痛)症狀者
・使用部位曾接受治療或患有疾病者
・患有肌腱炎、頸部揮鞭症候群、頸椎損傷、脊椎狹窄症、椎間盤突出者
・脊椎骨骼異常者、脊椎左右彎曲者
・正在接受醫師治療者、出現上述以外的身體異常狀況者
- 使用前請務必確認布套有無破損。無論發現任何極細小的破損都請勿使用，並請諮詢Doctor Air客服中心。(否則可能導致受傷・意外事故)
- 若在使用時感到身體出現異常、或使用後未出現效果，都請立即停止使用並諮詢醫師。(否則可能導致意外事故・身體不適)
- 請將AC轉接頭與電源插頭確實插至最底部。(否則可能因觸電或發熱而導致火災)
- 使用前請先確認操作按鈕與計時器正常運作。一段時間未使用之後也請務必先行確認。
- 本電器僅可由電器隨附之電源供應單元供電。






必須遵守

警告

 拔除電源插頭	<ul style="list-style-type: none"> ●發生異常・故障時請立即停止使用，並將AC轉接頭自插座上拔除。 (否則可能導致冒煙、起火、觸電) 異常・故障例： 當主機或電線受損、變形、發出異常噪音或異味・冒煙、異常發燙時，請立即諮詢Doctor Air客服中心。
 禁止以濕手碰觸	<ul style="list-style-type: none"> ●請勿以潮濕的雙手碰觸主機或AC轉接頭。(否則可能導致觸電・故障)
 禁止在浴室 淋浴間使用	<ul style="list-style-type: none"> ●本產品並無防水設計，請勿在浴室或洗臉台使用。(否則可能因漏電而導致觸電・起火)
 禁止拆解	<ul style="list-style-type: none"> ●切勿拆解・改造。(否則可能導致起火、意外事故、故障)

注意

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●使用時請勿將電源插頭自插座上拔除、或將AC轉接頭自按摩器主機上取下。 (否則可能導致意外事故・受傷) ●起濕疹時請勿使用。 ●每次的使用時間請勿超過10分鐘，並以1天2次、共20分鐘以內為標準。另，同一部位請勿連續使用3分鐘以上。(否則可能導致反效果・受傷) ●請勿用於按摩以外的目的。(否則可能導致受傷・身體不適) ●請勿與其他醫療器材同時使用。(否則可能導致意外事故・身體不適) ●請勿踩踏或站在主機上。(否則可能導致受傷・故障) ●使用時請勿睡著。(否則可能導致意外事故・受傷) ●請勿摔落本產品或以重物重壓，並請勿使本產品受到強烈撞擊。(否則可能導致火災、觸電、故障) ●使用時請勿以刻意以過強的力道按壓按摩球。(否則可能導致受傷・身體不適・故障) ●飲酒時或飲酒後請勿使用。(否則可能導致意外事故・受傷) ●使用時請勿進行其他作業。(否則可能導致意外事故・受傷) ●使用時請勿以肌膚直接接觸按摩球。 ●使用時請勿將按摩球側面對地板。(否則可能導致故障) ●請勿使用於頭部、肘部、膝部、喉嚨、胸部、腹部。(否則可能導致受傷・身體不適) ●請勿以產品夾捏手或腳。(否則可能導致受傷・身體不適) ●請勿2人以上同時乘坐主機。(否則可能導致故障或受傷)
 必須遵守	<ul style="list-style-type: none"> ●使用延長線時，請務必遵守額定電壓。(否則可能導致火災・燒毀) ●用餐前・用餐後請間隔足夠的時間再使用。(否則可能導致身體不適) ●剛開始使用時，請從刺激最低的段數開始按摩。 ●使用後請確實關閉電源，並將AC轉接頭自插座上拔除。
 拔除電源插頭	<ul style="list-style-type: none"> ●停電時請立即將電源插頭自插座上拔除。(否則可能導致預料之外的事務) ●當不使用時，請將電源插頭自插座上拔除。(否則可能因灰塵或濕氣造成絕緣體劣化，並導致漏電或火災) ●當開始打雷時，請立即將電源插頭自插座上拔除。(否則可能導致故障) ●當進行保養時，請務必將電源插頭自插座上拔除。(否則可能導致觸電・意外事故)

功能及安全規格

1. 功能

項目	規格	備註
揉捏次數： 具備揉捏功能的機器	約 23 次/分	測試方法： JIS T 2002
按摩部位的移動速度 具備按摩部位移動功 能的機器	約 1.4cm/秒	

2. 其他功能

項目	規格	備註
計時器	約 10 分鐘	測試方法： JIS T 2002

使用目的與效果

用於按摩。一般家用。



※請勿用於上述以外的目的。

使用前的注意事項


- 使用前請務必確認布套有無破損。無論發現任何極細小的破損都請勿使用。
- 使用前請先確認遙控器與計時器功能正常運作。一段時間未使用之後也請務必先行確認。
- 當出現異常狀況時請直接停止使用，並請諮詢Doctor Air客服中心。

各部位名稱及配件

主機

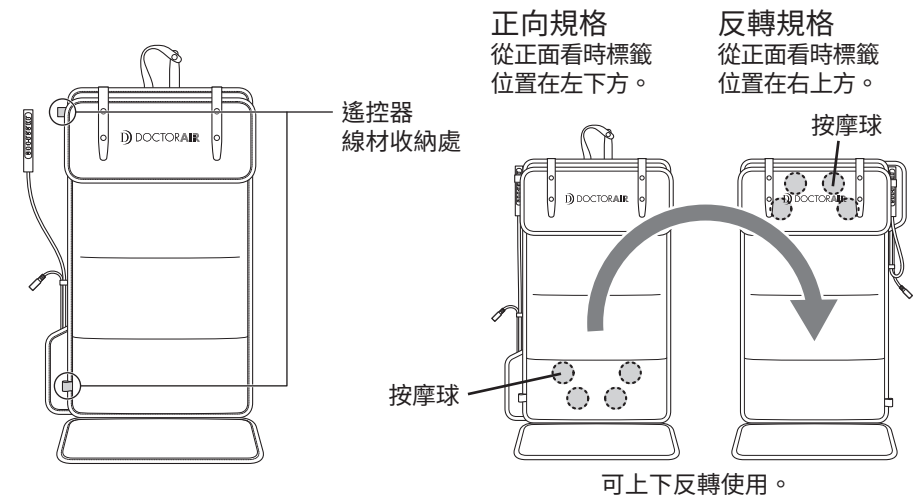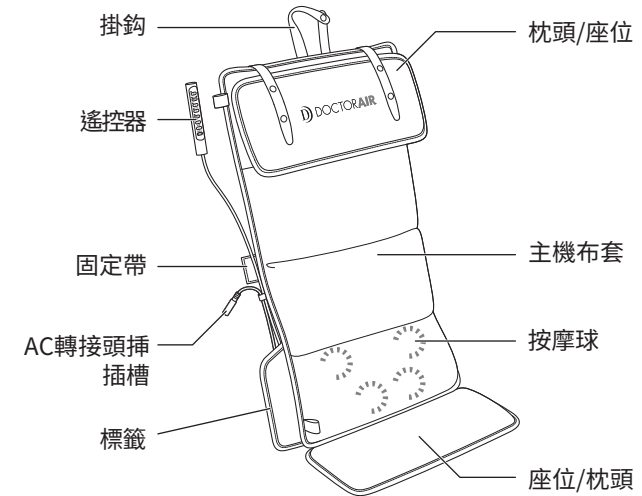

配件

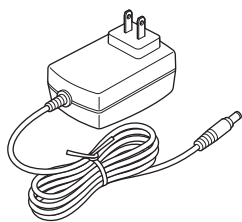


AC轉接頭



使用說明書（本說明書・附保證書）

關於遙控器


按鈕的功能

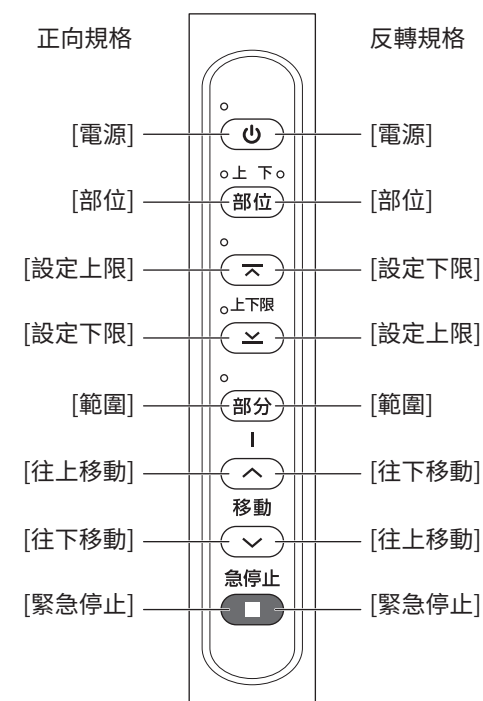

按鈕名稱	功能	
	正向規格	反轉規格
[電源]	開啟/關閉電源。	
[部位]	變更全身/上半部/下半部等按摩部位。	
[設定上限]	設定按摩球移動範圍的上限。	設定按摩球移動範圍的下限。
[設定下限]	設定按摩球移動範圍的下限。	設定按摩球移動範圍的上限。

[範圍]	限制按摩球的位置。 上半部、下半部可分別設定約10cm的範圍。	
[往上移動]	設定範圍後將按摩球的位置往上移動	設定範圍後將按摩球的位置往下移動。
[往下移動]	設定範圍後將按摩球的位置往下移動。	設定範圍後將按摩球的位置往上移動。
[緊急停止]	停止所有動作。	

關於顯示燈號

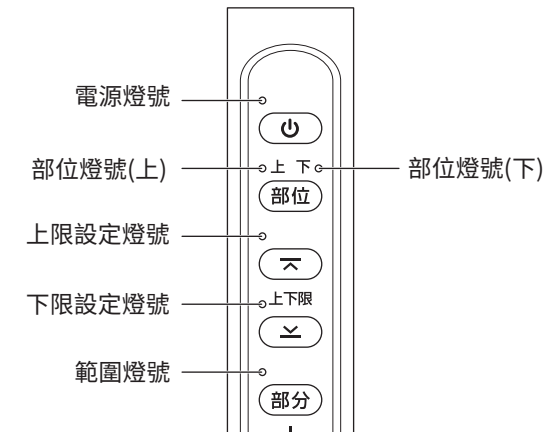


電源燈號	<ul style="list-style-type: none"> • 電源開啟時、緊急停止時亮燈(白) • 約3分鐘沒有任何操作時熄燈 *恢復動作時熄燈 *恢復動作時按下[緊急停止]按鈕，再按下[電源]按鈕，按摩球將回到固定位置。
部位燈號(上)/(下)	<ul style="list-style-type: none"> • 全身：(上)/(下)皆會亮燈(白) • 上半部：只有(上)會亮燈(白) • 下半部：只有(下)會亮燈(白)
上限設定燈號	<ul style="list-style-type: none"> • 設定上限時亮燈(白)
下限設定燈號	<ul style="list-style-type: none"> • 設定下限時亮燈(白)
範圍燈號	<ul style="list-style-type: none"> • 設定範圍時亮燈(白)

使用方法

使用3D全方位紓壓按摩墊

鋪在地上使用時

請先確認預計放置本產品的地面無其他物品。若在有其他物品的狀況下使用，將可能導致本產品或地面、物品損壞。為了避免地面損傷並減少使用時的運作聲響，建議在本產品下方鋪設墊子。

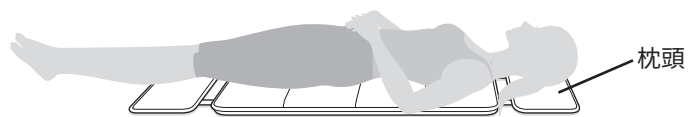


※請將頭部枕於枕頭上。

※當鋪在地上使用時，若身體感到力道過於強烈，可曲起膝蓋或抬高臀部使用以便減輕力道。


放在椅子上使用時

請設置於穩固且有椅背的椅子或沙發等處。請先將主機設置於穩固且有椅背的椅子等處，再以固定帶固定於椅背上。

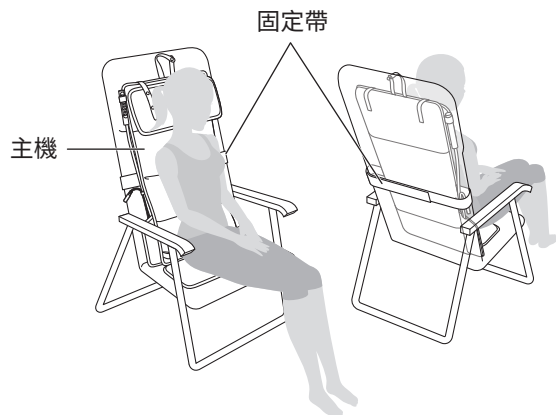

連接電源

- 1 將主機的AC轉接頭插槽連接AC轉接頭。
請確實插至最底部。

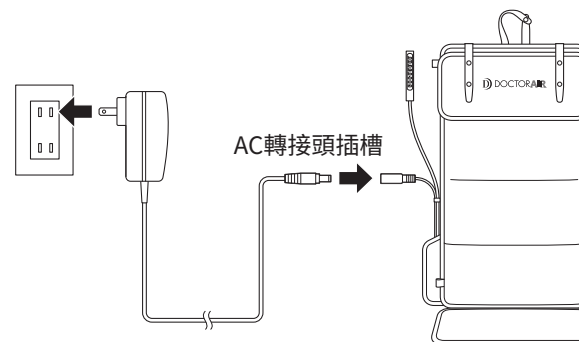

- 2 請將電源插頭確實插至插座最底部。
若按摩球並非位於固定位置，則當連接AC轉接頭之後，按摩球會自動移動至固定位置並停止運作。

⚠ 注意


- 請勿在取下主機布套的狀態下使用。若主機布套破損請停止使用，並請諮詢 Doctor Air 客服中心。
- 請勿用於附滾輪的椅子或旋轉椅。否則可能因翻倒而導致意外事故或受傷。
- 當用於具備平躺功能的椅子上時，使用中請務必注意避免放倒椅背。
- 當用於和室椅等處時，請勿在電熱毯上使用。
- 若椅子有受損的可能性，請在本產品與椅子之間鋪設墊子等物品以防受損。
- 當鋪設於椅子上或移動本產品時，請勿拉扯遙控器或AC轉接頭，應將遙控器放入主機側面的遙控器收納處，並將AC轉接頭自主機上取下。
- 當連接電源線與AC轉接頭時，請確實插至最底部。

開始按摩

在依照「使用3D全方位紓壓按摩墊」（第14頁）的步驟，將3D全方位紓壓按摩墊設置於地面或椅子等處之後，請如下所示開始進行按摩。

※本產品可藉由上下反轉使用來改變按摩球的按摩方式。

開始按摩

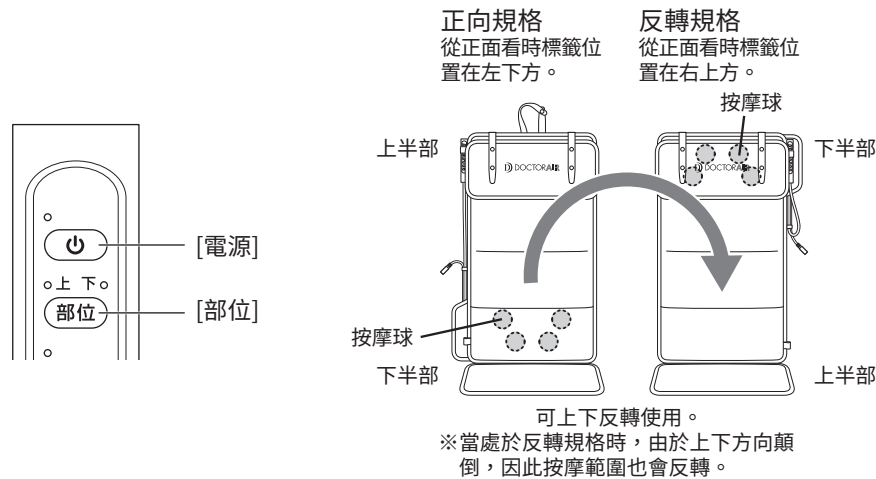

1 將電源插頭確實插至插座的最底部。

- 電源燈號將會閃爍。
- 若前一次使用時並未正常結束運作，則按摩球會回到固定位置。

2 按下[電源]按鈕，將以[全身]範圍開始進行按摩。

3 按下[部位]按鈕選擇按摩範圍。

每次按下[部位]按鈕，將會如下所示改變按摩範圍。


上半身→下半身→全身→上半身...

- 上半身：從肩膀至背部進行按摩
- 下半身：從背部至腰部進行按摩
- 全身：全身按摩

※當處於反轉規格時，每次按下[部位]按鈕將會以下半身→上半身→全身→下半身.....的順序改變按摩範圍。

設定按摩球移動範圍的上限・下限

※()內為反轉規格時的設定。

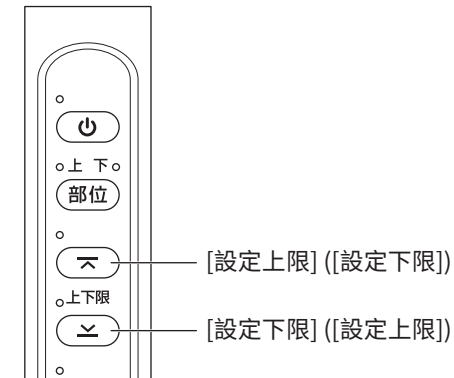

●設定上限

當按摩球正在移動時，按下[設定上限]。按下按鈕時的位置將成為上限。

※當處於反轉規格時，則按下[設定下限]。

按下按鈕時的位置將成為上限。

●設定下限

當按摩球正在移動時，按下[設定下限]。按下按鈕時的位置將成為下限。

※當處於反轉規格時，則按下[設定上限]。

按下按鈕時的位置將成為下限。


※亦可只設定[全身]為按摩範圍。

※再次按下[設定上限]/[設定下限]按鈕即可解除設定。

※關閉電源將會解除設定。

限制按摩球的移動範圍

※ () 內為反轉規格時的設定。

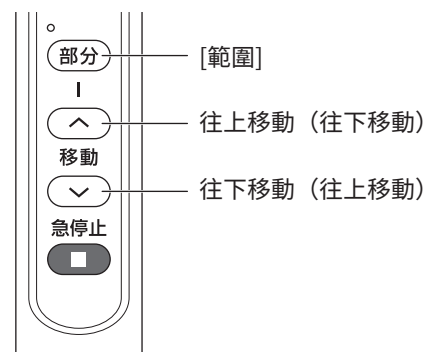

按下[範圍]按鈕之後，按摩球會在按下按鈕時的位置約10cm的範圍內上下移動。

●使按摩球往上移動

按下[範圍]按鈕之後，再連續按壓[往上移動]按鈕，按摩球將會往上移動。

※當處於反轉規格時，在按下[範圍]按鈕之後，應連續按壓[往下移動]按鈕，按摩球將會往上移動。

當按摩球位於理想位置時請放開按鈕。按摩球會在放開按鈕時的位置約10cm的範圍內上下移動。

●使按摩球往下移動

按下[範圍]按鈕之後，再連續按壓[往下移動]按鈕，按摩球將會往下移動。


※當處於反轉規格時，在按下[範圍]按鈕之後，應連續按壓[往上移動]按鈕，按摩球將會往下移動。

當按摩球位於理想位置時請放開按鈕。按摩球會在放開按鈕時的位置約10cm的範圍內上下移動。

想中斷按摩時

按下[電源]按鈕即會結束按摩，按摩球將回到固定位置。

當在按摩中感到異常狀況時

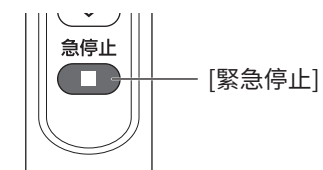

按下[緊急停止]按鈕之後，所有動作將會立即停止。

按下[電源]按鈕之後，按摩球將回到固定位置。

如欲再次開始按摩，請在按摩球回到固定位置之後按下[電源]按鈕。

使用結束之後

當關閉電源之後，請將AC轉接頭自插座與主機上取下，並將遙控器放入主機側面的遙控器收納處。（遙控器收納處的位置請參考「各部位名稱與配件」（第9頁））

必要時請將髒污擦拭乾淨，保存於室溫並避免高溫潮濕的場所。

保養及保存方法

保養方法

注意事項

- 在開始保養之前，請務必將AC轉接頭自插座拔除。
- 請勿使用稀釋劑・石油類・酒精等溶劑或藥物、熱水。否則可能導致故障或零件破裂、變色等。

請以乾布或軟布擦拭髒污。

若髒污狀況嚴重，請將海綿或軟布以水沾濕後擰乾擦拭。其後請以乾布拭乾。

保存方法

- 保存時請務必將AC轉接頭自插座拔除。
- 請勿使AC轉接頭遭到擠壓扭轉。
- 請確實清除髒汙與灰塵，並避免保存於浴室等潮濕有水的場所、或會遭到陽光直接曝曬的場所。
- 請勿保存於嬰幼兒或年齡幼小的兒童可觸及的場所、或是寵物可觸及的場所。
- 預計將長時間存放時，請罩上防塵罩等物品以防沾染髒污或灰塵。

丟棄時

- 主機

本產品採用PP材質，並未使用有害物質。欲丟棄本產品時，請依照居住當地自治單位的垃圾分類規定丟棄。

- 專用的AC轉接頭

欲丟棄專用的AC轉接頭時，請依照居住當地自治單位的垃圾分類規定丟棄。詳細內容請洽詢各地區的自治單位。

故障排除

問題	確認事項
連接電源卻沒有反應	<ul style="list-style-type: none"> · 請確認AC轉接頭有確實連接主機及插座。 · 可能是因為安全裝置啟動中。請在1小時之後再次嘗試。 · 若只插入AC轉接頭並不會開始按摩。需按下電源按鈕才會開始按摩。
突然停止運作	<ul style="list-style-type: none"> · 依照計時器的設定，會在約10分鐘後自動回到固定位置並停止運作。 · 若按摩球負荷過大而造成內部溫度上升，將會啟動安全裝置並暫時停止運作。請在1小時之後再次嘗試。
停止按摩之後，再次按下電源按鈕卻沒有啟動	<ul style="list-style-type: none"> · 可能是因為尚處於結束的過程中，電源按鈕將不會有所反應。請在確認按摩球回到固定位置之後，再次按下電源按鈕。
使用時產品發出噪音	<ul style="list-style-type: none"> · 本產品的結構會發出一定程度的運作聲響。雖然此現象並非異常，但仍請確認是否因設置不當而使產品變形。

若無法透過上述方法解決問題，請諮詢Doctor Air客服中心。

關於安全裝置

本產品內設有安全裝置。安全裝置主要會在以下狀況時啟動，並自動關閉電源。

- 因連續使用等原因，而造成馬達或AC轉接頭的內部溫度過高時。
- 按摩球的負荷過大時。
- 感測到任何可能影響安全的異常狀況時。

當馬達或AC轉接頭的內部溫度回到正常狀態之後，即可再次使用本產品。
當在使用中停止運作，且按下電源按鈕（On/Off）皆無反應時，請在1小時之後再次嘗試。

基本規格

主機

產品名稱	3D全方位紓壓按摩墊
型號	MS-08
電源	AC 100-240 V 50/60Hz
額定功率	36W
按摩次數	約23次/分鐘
按摩部位移動速度	約1.4cm/秒
計時器	約10分鐘
適用體重	100kg以下
使用環境溫度濕度	+10°C~+40°C 85% RH以下
保存環境溫度濕度	0°C~+60°C 85% RH以下
尺寸	W450×H1320×D120mm(包含座椅/枕頭)
重量	約2.5kg(主機)
配件	AC轉接頭、使用說明書(附保證書)
材料	POM、PA、PP、ABS、PU(聚氨酯)、鋁
產地	中國

AC轉接頭

型號	額定輸入功率	額定輸出功率
XH1200-3000WJ	AC100-240V 50/60Hz 0.8A	DC12.0V 3.0A

※ 為了加強功能・性能，產品的規格及設計可能會在未經預告之下有所變更。

產品限用有害物質清況表

設備名稱：3D全方位舒壓按摩墊 Equipment name		型號（型式）：MS-08 Type designation (Type)				
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源供應器	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
電路板	—	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1wt%”及“超出0.01wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

保固及售後服務

如欲諮詢使用・保養・維修的方法，請洽詢原購買經銷商。

保證書

購買時請確認已確實記載「購買日期」、「銷售店名」欄位。
另，請仔細閱讀內容並妥善保存。

委託維修

請確認「故障排除」（第21頁）的內容。若無法解決問題、或反覆出現相同的問題，則請將電源線取下，向原購買經銷商諮詢並提供以下資訊。

- ・ 購買日期
- ・ 產品型號：
- ・ 故障狀況（請盡量具體描述）

在保固期內委託維修

將依照保證書的規定進行維修。另，即使仍在保固期內亦有可能會產生額外費用，請仔細閱讀保證書。保固期：記載於保證書中。

超過保固期之後

若在檢測之後判斷能夠修復，則將因應顧客委託進行付費維修。維修費用將分成以下項目。

- ・ 技術費：檢測・維修・調整・檢查等費用
- ・ 零件費：用於維修的零件及輔助用的材料費用
- ・ 維修產品的運費：維修產品的來回運費


維修用功能性零件的保留期限

針對用於維持本產品性能的維修用功能性零件，在停止製造之後的最短保留期限為5年。保留期限結束之後將停止受理維修保養。

如有其他不明事項

若針對售後服務尚有任何不明之處，請諮詢原購買經銷商或Doctor Air客服中心。

請進行安心檢查

請對使用多年的3D全方位紓壓按摩墊進行檢查	
是否有這些狀況？	停止使用
 安心檢查 <ul style="list-style-type: none">●冒煙、發出異味或聲響●AC轉接頭異常發熱●AC轉接頭鬆動或接觸不良●內部有異物或進水●主機或布套、AC轉接頭出現變形或破損●其他異常狀況	為了預防故障或意外事故，請關閉電源、取下AC轉接頭，並請務必向原購買經銷商或Doctor Air客服中心委託檢查或維修。

免費保固規定

1. 在依照使用說明書・主機標籤等注意事項使用的狀態下，若在保固期內發生故障，將提供免費的維修服務。但針對離島或等相當於離島的偏遠地區，則需由顧客負擔維修所需的交通費、住宿費、運費（來回）等。
 - ※如欲在保固期內委託免費維修，請向經銷商提供・出示本產品以及本保證書並進行申請。
 - ※如因搬家或產品為贈品等原因，而無法向本保證書中記載的經銷商申請免費維修，請諮詢 Doctor Air 客服中心。
2. 即使尚在保固期內，以下狀況原則上仍需另外付費。
 - (1) 未依照使用說明書中的方法使用而導致故障或損壞
 - (2) 因不當修理或改造而導致故障或損壞
 - (3) 因購買後的運送、摔落等原因而導致故障或損壞
 - (4) 用於一般家用以外（例如商業等）用途而導致故障或損壞
 - (5) 未出示保證書
 - (6) 保證書中未記載購買年月日、顧客姓名、住址、銷售店名，或文字遭到塗改時
 - (7) 因配備於車輛・船舶上而導致故障或損壞
 - (8) 因火災・地震・淹水・雷擊・其他天災・電壓異常・使用非指定的電源（電壓、頻率）等而導致故障或損壞
 - (9) 經本公司（或本公司關係企業）以外業者進行不當維修、改造而導致故障或損壞
 - (10) 耗材、主機以外的消耗性配件
 - (11) 因磨損或劣化而更換非永久性配件
3. 本保證書僅限於日本國內有效。
4. 本保證書無法再次發行，敬請妥善保管。當進行付費維修時，將由顧客負擔維修產品的運費・維修產品的零件費・技術費・出差費。

維修備註

- 本保證書根據書中所註明的期限與條件，約定提供免費維修的服務。本保證書並非用於限制顧客的法律權利。若針對超過保固期之後的維修事宜有不明之處，請諮詢原購買經銷商或Doctor Air客服中心。